



CALIDAD DE VIDA

TECNOSTENT

Fabrica stents diseñados como tratamiento paliativo de estenosis malignas de las vías digestivas que mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes .



INNOVACIÓN

Tecnostent es la única empresa en Colombia que diseña y fabrica stents metálicos autoexpandibles.


INVESTIGACIÓN

Tecnostent ha diseñado y desarrollado stents bajo asesoría del Dr. Song y el Dr. Kang (creadores y pioneros a nivel mundial de la fabricación de stents).




EXPERIENCIA

Durante más de 20 años, **Tecnostent** ha suministrado stents con los más altos estándares de calidad a entidades de salud de todo el país comprometidas con la seguridad de sus pacientes.

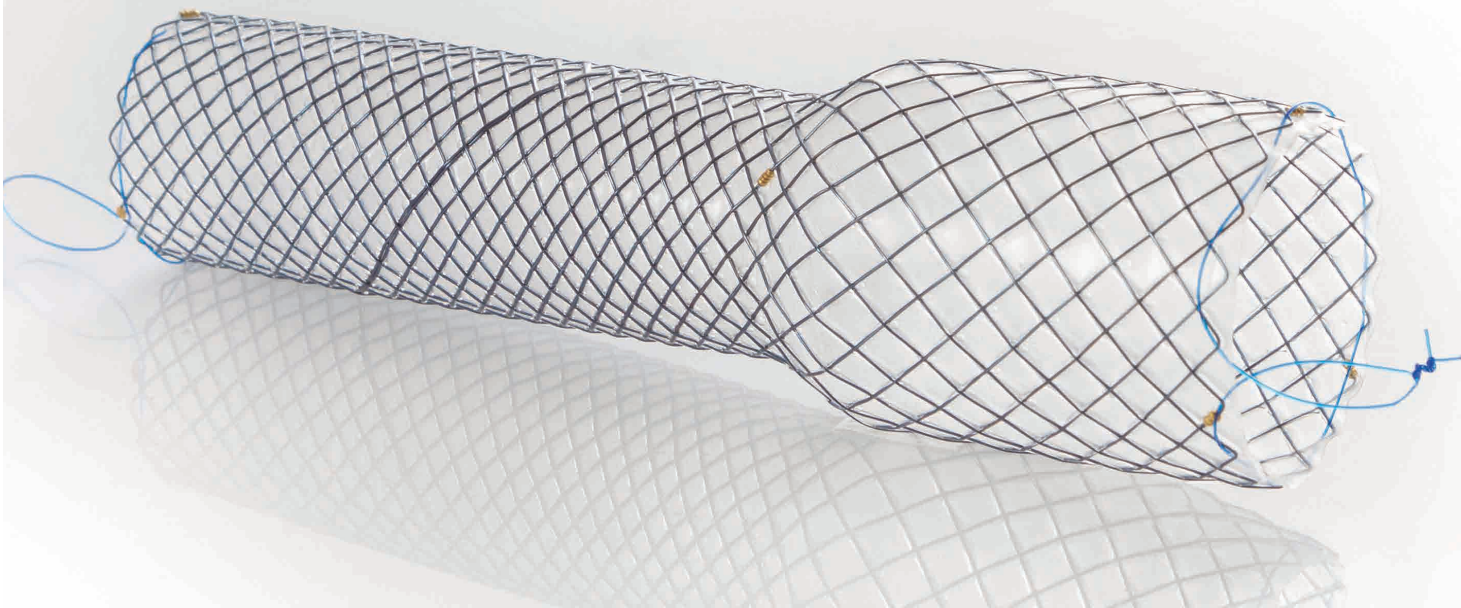


Stents metálicos autoexpandibles para vías digestivas.

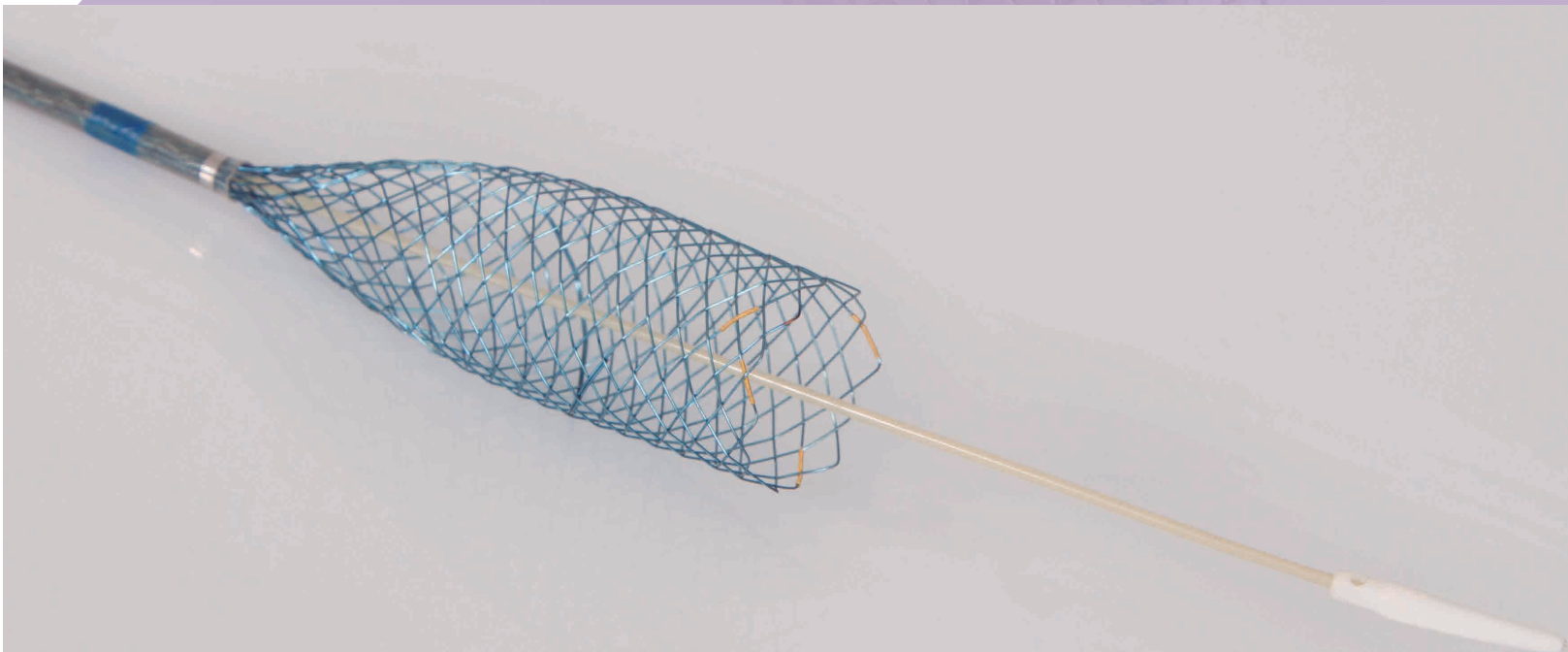

- **Stent Biliar Endoscópico** —●
 - Stent Biliar Endoscópico No Cubierto
 - Stent Biliar Endoscópico Cubierto
 - Stent Biliar Percutáneo No Cubierto



Stent Biliar Endoscópico No Cubierto

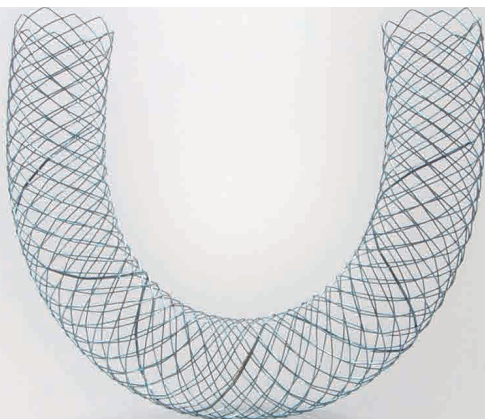


Referencia: BE -1008

El Stent Biliar Endoscópico es un dispositivo autoexpandible, diseñado y fabricado para ser utilizado por vía endoscópica como tratamiento paliativo de estenosis malignas de la vía biliar.


Características del Stent

- Diámetro del cuerpo: 10 mm.
- Stent no cubierto.
- Fabricación en alambre de Nitinol de núcleo radiopaco que permite mayor visibilidad fluoroscópica.
- Materiales del stent procedentes de empresas reconocidas a nivel mundial.
- Flexibilidad, para una buena adaptación a la zona anatómica.
- Fuerza radial permite mantener permeabilidad luminal, manteniendo una presión constante y moderada.

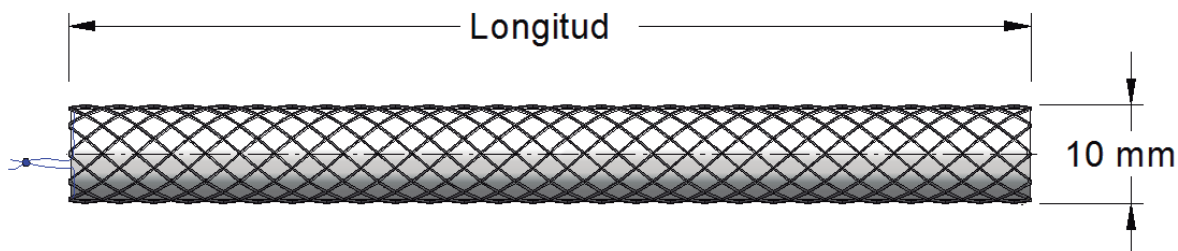

Características del Introductor

- Diámetro: 8 Fr
- Longitud máxima utilizable: 180 cm
- Marcas radiopacas para delimitar el Stent dentro del introductor
- Ojiva atraumática
- Guía recomendada: .035"

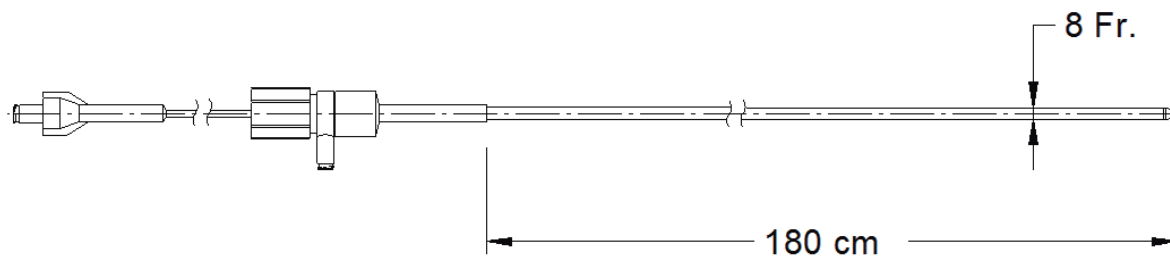


Dimensiones Stent Biliar Endoscópico No Cubierto

Dimensiones Stent Duodenal Endoscópico			
Referencia	Diámetro Cuerpo (mm)	Longitud (cm)	Diámetro Introductor (Fr.)
BE-1006	10	6	8
BE-1008	10	8	8
BE-1010	10	10	8

*El diseño del stent y sus accesorios puede sufrir cambios orientados a mejorar su desempeño. (Vig. Sep 2020)

Stent Biliar Endoscópico Cubierto

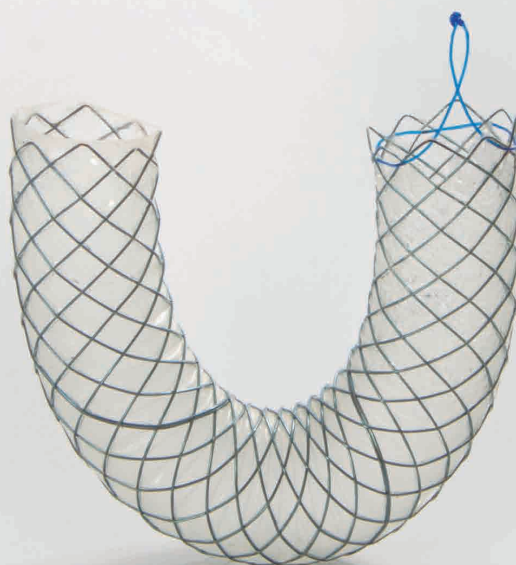


Referencia: BEC-1008

El Stent Biliar Endoscópico es un dispositivo autoexpandible, diseñado y fabricado para ser utilizado por vía endoscópica como tratamiento paliativo de estenosis biliares malignas.


Características del Stent

- Diámetro del cuerpo: 10 mm.
- Asa de retracción.
- Totalmente cubierto en silicona grado médico, previene crecimiento hacia lumen.
- Fabricación en alambre de Nitinol de núcleo radiopaco que permite mayor visibilidad fluroscópica.
- Materiales del stent procedentes de empresas reconocidas a nivel mundial.
- Flexibilidad, para una buena adaptación a la zona anatómica.
- Fuerza radial permite mantener permeabilidad luminal, manteniendo una presión constante y moderada.

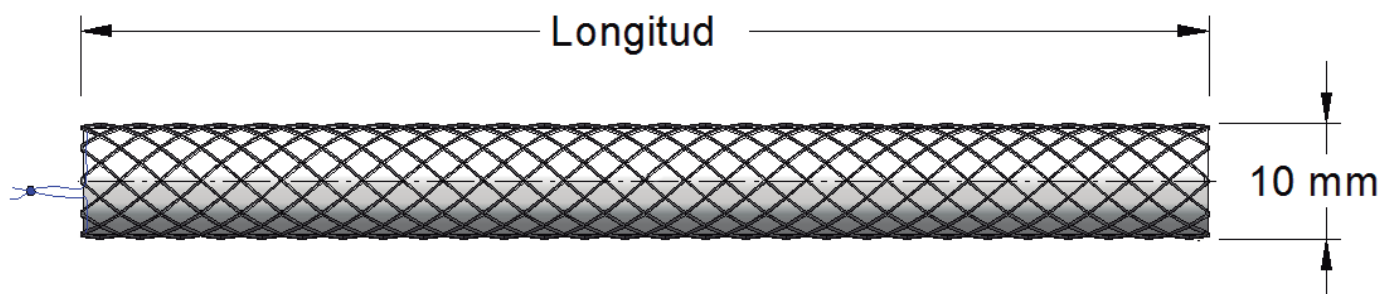

Características del Introductor

- Diámetro: 8 Fr
- Longitud máxima utilizable: 180 cm
- Marcas radiopacas para delimitar el Stent dentro del introductor
- Ojiva atraumática
- Guía recomendada: .035"

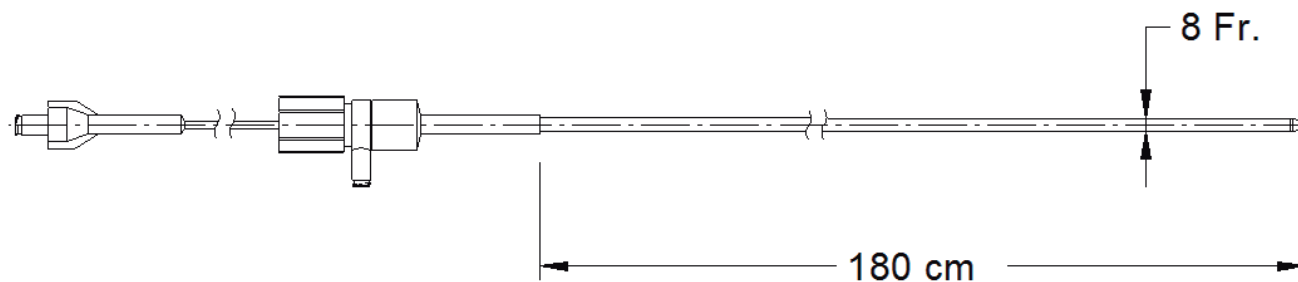


Dimensiones Stent Biliar Endoscópico Cubierto

Dimensiones			
Referencia	Diámetro Cuerpo (mm)	Longitud (cm)	Diámetro Introductor (Fr.)
BEC-1006	10	6	8
BEC-1008	10	8	8

*El diseño del stent y sus accesorios puede sufrir cambios orientados a mejorar su desempeño. (Vig. Sep 2020)

Stent Biliar Percutáneo No Cubierto

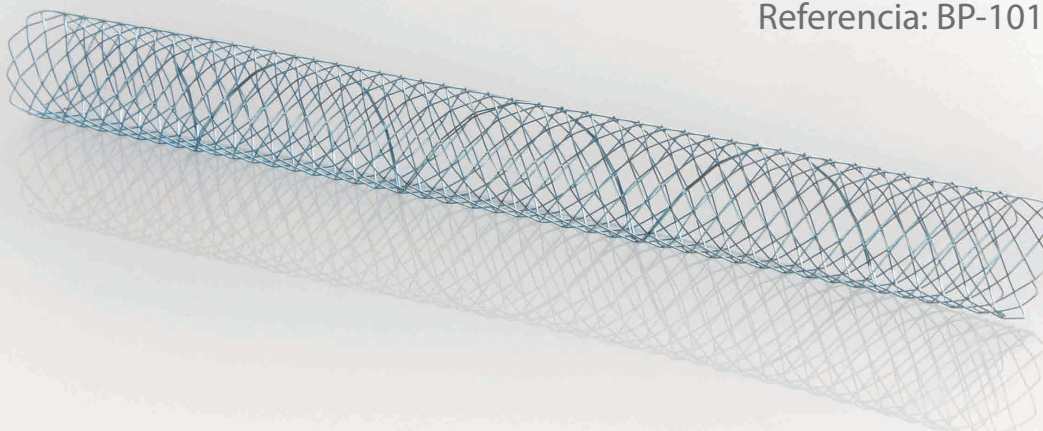


Referencia: BP-1010.

El Stent Biliar Percutáneo es un dispositivo autoexpandible, diseñado y fabricado para ser utilizado por vía percutánea como tratamiento paliativo de estenosis biliares malignas.


Características del Stent

- Diámetro del cuerpo: 10 mm.
- Stent no cubierto.
- Fabricación en alambre de Nitinol de núcleo radiopaco que permite mayor visibilidad fluroscópica.
- Materiales del stent procedentes de empresas reconocidas a nivel mundial.
- Flexibilidad, para una buena adaptación a la zona anatómica.
- Fuerza radial permite mantener permeabilidad luminal, manteniendo una presión constante y moderada.

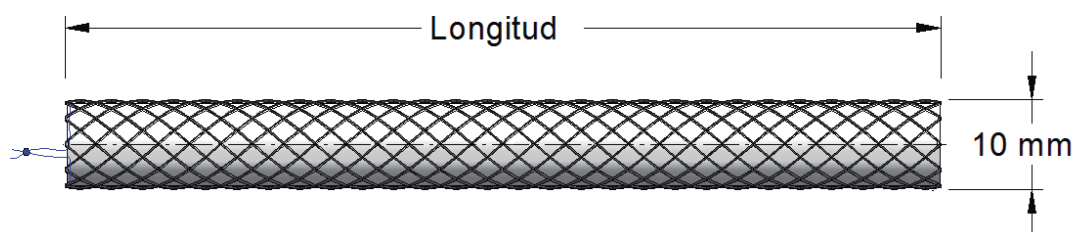

Características del Introducitor

- Diámetro: 8 Fr
- Longitud máxima utilizable: 50 cm
- Marcas radiopacas para delimitar el Stent dentro del introducitor
- Ojiva atraumática
- Guía recomendada: .035"

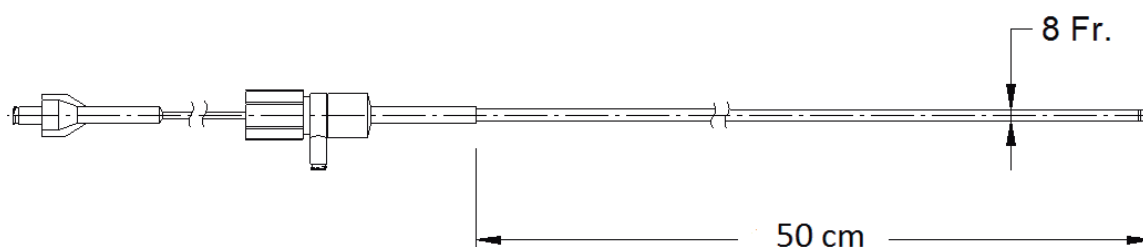

Dimensiones Stent Biliar Percutáneo No Cubierto

Dimensiones			
Referencia	Diámetro Cuerpo (mm)	Longitud (cm)	Diámetro Introducitor (Fr.)
BEP-1008	10	8	8
BEP-1010	10	10	8

*El diseño del stent y sus accesorios puede sufrir cambios orientados a mejorar su desempeño. (Vig. Sep 2020)



 Cra. 48 No. 50 Sur - 128 Of. 1019
C.C. Mayorca Etapa 2 - Torre Médica
Sabaneta – Colombia
Código postal 055450

 034 – 4797414

 (057) 317 431 68 85
(057) 316 832 90 26
(057) 316 865 79 85