



## CALIDAD DE VIDA

### TECNOSTENT

Fabrica stents diseñados como tratamiento paliativo de estenosis malignas de las vías digestivas que mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes .



## INNOVACIÓN

Tecnostent es la única empresa en Colombia que diseña y fabrica stents metálicos autoexpandibles.


## INVESTIGACIÓN

Tecnostent ha diseñado y desarrollado stents bajo asesoría del Dr. Song y el Dr. Kang (creadores y pioneros a nivel mundial de la fabricación de stents).




## EXPERIENCIA

Durante más de 20 años, Tecnostent ha suministrado stents con los más altos estándares de calidad a entidades de salud de todo el país comprometidas con la seguridad de sus pacientes.

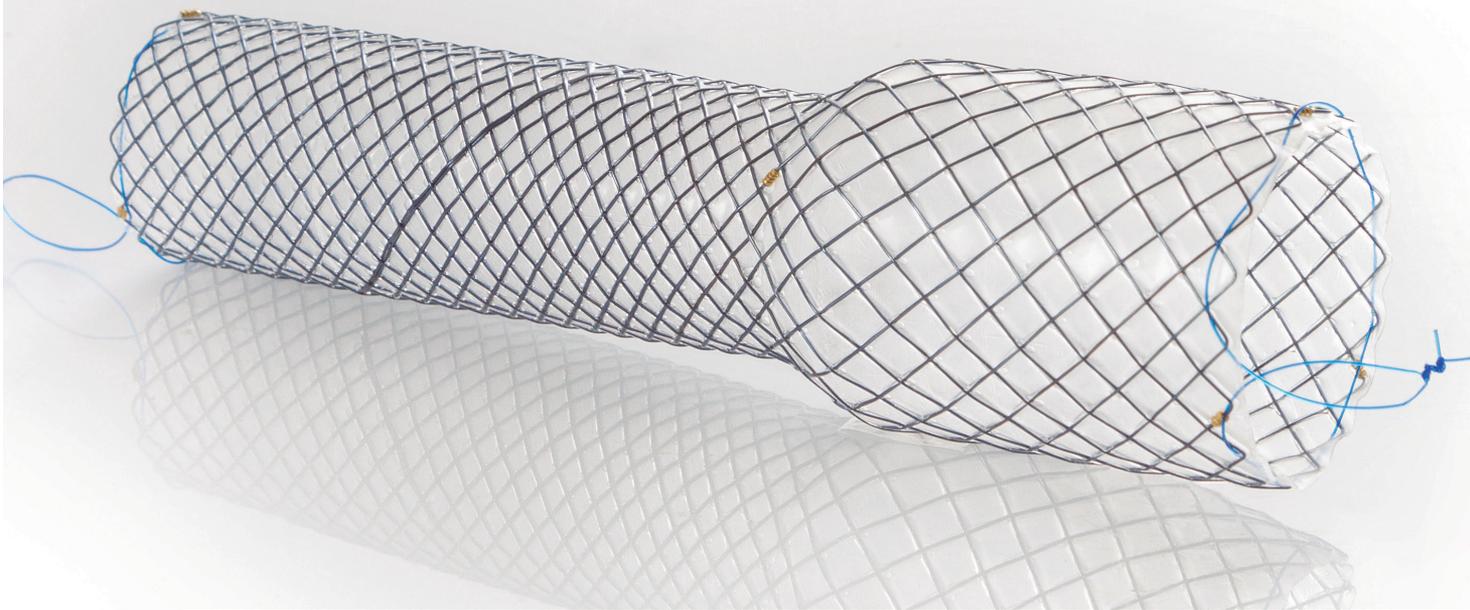


Stents metálicos autoexpandibles para vías digestivas.

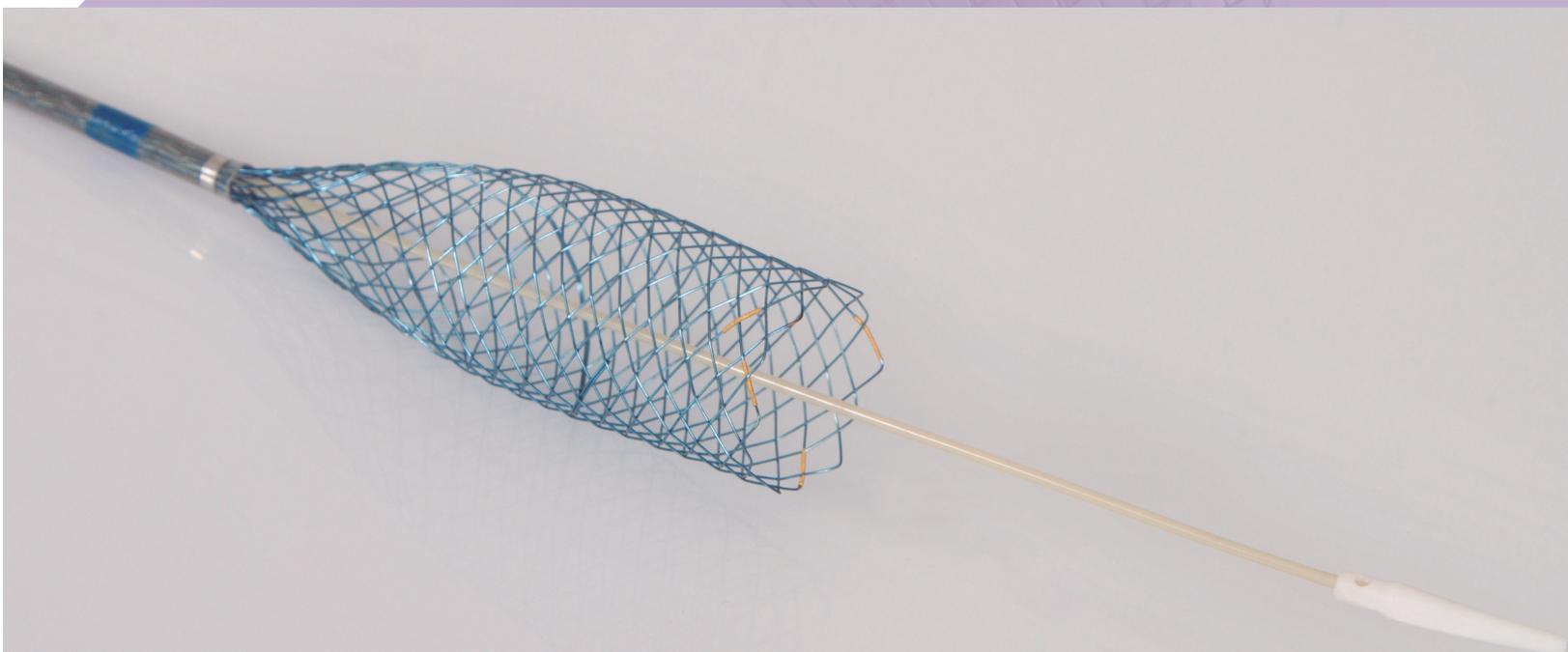


- Stent Duodenal Endoscópico —● -Stent Duodenal Endoscópico No Cubierto



# Stent Duodenal Endoscópico No Cubierto

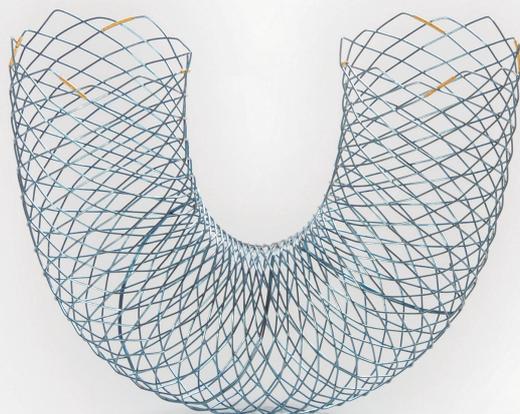

Referencia: DE-1810

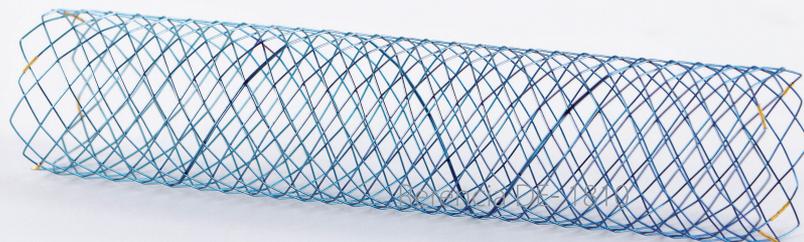


Referencia: DE-2210

El Stent Duodenal endoscópico es un dispositivo autoexpandible, diseñado y fabricado para ser utilizado por vía endoscópica como tratamiento paliativo de estenosis duodenales malignas.


## Características del Stent

- Diámetro del cuerpo: 18 mm y 22 mm
- Stent no cubierto.
- Fabricación en alambre Nitinol.
- Materiales del stent procedentes de empresas reconocidas a nivel mundial.
- Flexibilidad, para una buena adaptación a la zona anatómica.
- Fuerza radial permite mantener permeabilidad luminal, manteniendo una presión constante y moderada.
- Posicionamiento preciso logrado mediante marcas radiopacas en los extremos.

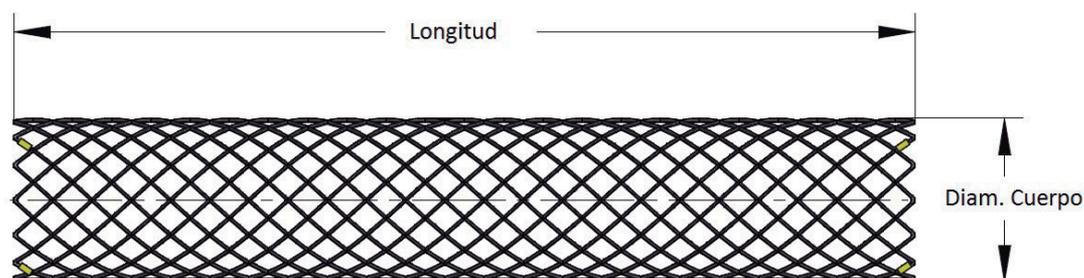

## Características del Introdutor

- Diámetro: 10 Fr
- Longitud máxima utilizable: 224 cm
- Marcas radiopacas para delimitar el Stent dentro del introductor
- Ojiva atraumática
- Guía recomendada: .035"

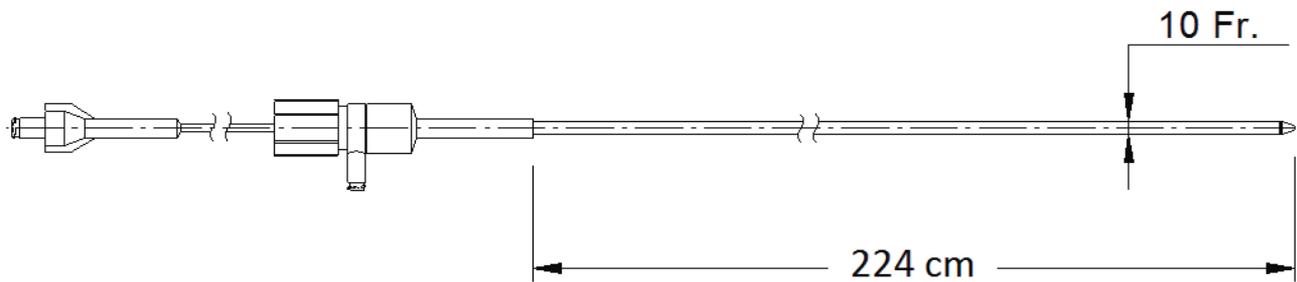

## Dimensiones Stent Duodenal Endoscópico No Cubierto

Dimensiones			
Referencia	Diámetro Cuerpo (mm)	Longitud (cm)	Diámetro Introdutor (Fr.)
DE-1808	18	8	10
DE-1810	18	10	10
DE-2208	22	8	10
DE-2210	22	10	10

\*El diseño del stent y sus accesorios puede sufrir cambios orientados a mejorar su desempeño. (Vig. Sep 2020 )



 Cra. 48 No. 50 Sur - 128 Of. 1019  
C.C. Mayorca Etapa 2 - Torre Médica  
Sabaneta – Colombia  
Código postal 055450

 034 – 4797414

 (057) 317 431 68 85  
(057) 316 832 90 26  
(057) 316 865 79 85